

MC1000



MC6100

MC10K
MC30K

MC100KS

고분해능... 1/10,000,000

질량 비교기로 개발이 시작된 MC시리즈는 같은 용량의 기존제품보다 소수점 한자리를 더 표시.
확장된 분해능으로 인하여 고중량의 용기가 사용되는 상황에 응용이 가능.

내부분동 기본 장착!

Auto Self-Calibration

SHS(Super Hybrid Sensor) 탑재

비교 측정 기능

Data 메모리 기능 탑재(최대 200개)

동물계량 기능(Auto-hold)

내 발란스가 소수점 한자리만 더 표시해 준다면...

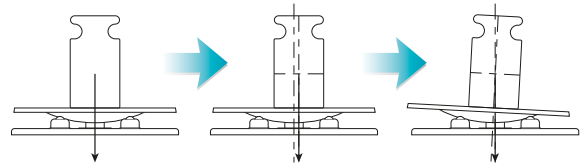
OIML기준 F1급 분동 이하 관리시

Recommended Measurement Ranges

Model	Applicable mass	1g	2g	5g	10g	20g	50g	100g	200g	500g	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg
MC 1000	F1														
	M1														
	M2														
	F2														
MC 6100	F1														
	M1														
	M2														
	F2														
MC 10K	F1														
	M1														
	M2														
	F2														
MC 30K	F1														
	M1														
	M2														
	F2														

Mass Comparitor(분동 비교) 키트

자동중심조정계량판을 사용하여 OIML 기준 F1급 이하 분동의 관리가 가능합니다.

A&D 홈페이지 www.andk.co.kr 에서

자료실->미디어룸을 방문하시면 사용법을 확인 할 수 있습니다!

엑세서리

AX-MC1000PAN 자동-중심 판(MC1000)

AX-MC6100PAN 자동-중심 판(MC6100)

AX-M10K/30KPAN 자동-중심 판(MC10K/30K)

자동-중심판을 탑재한
MC 시리즈

방진/방수 처리등급 IP65 (MC10K/30K)

All models in the MC Series



MC 1000/6100



MC 10K/30K



SHS 센서적용 / VFD 형광표시부 / 내부분동에 의한 캘리브레이션 / RS-232C 인터페이스 / GLP 규격을 준수 / 계수기능 / % 기능 / 동물계량기능 / 비교기능 / 전원연결시 표시부 자동 ON / 자동 OFF 기능 / 언더훅 기능 / 소프트웨어 제공

■ Quick USB 인터페이스 (MC1000/6100) ■ 누적 중량 합산 기능 / 방진방수 등급 IP65 (MC10K/30K)

제품사양

모델	MC1000	MC6100	MC10K	MC30K	MC100KS
용량	1100 g	6100 g	10.1 kg	31 kg	101 kg
최소표시	0.0001 g	0.001 g		0.01 g	0.1 g
반복성*1 (표준편차)	0.0005 g	0.004 g	0.005 g	0.015 g	0.1g(60kg이하) / 0.2g
직선성	±0.003 g	±0.03 g	±0.03 g	±0.2 g	±2.4 g
안정시간(FAST시)	약 1.5초				
사용온도/습도	5℃ ~ 40℃, 85%RH 이하				
Display Refresh rate	5회/초 또는 10회/초				
표준 인터페이스	RS-232C				
계량판 크기	128×128 mm	165×165 mm	270×210mm		386×346mm
전원	약 11VA (AC 아답터)				약 15VA (AC 아답터)
제품 크기	210(W)×317(D)×86(H)mm		300(W)×355(D)×111(H)mm		373×615×130H)mm
제품 중량	4.6 kg	5.1 kg	9.3kg		약 18kg
옵션/부가설명	MC-1000/6100 GX-02*3 Quick USB 인터페이스 GX-04*3*4 부저/RS-232C/Current loop가 있는 컴퓨터이터 출력 GX-06*3*4 아날로그 전압 출력 / Current loop GX-12 동물계량판 GX-13 비중키트 (MC1000만 적용가능) *3 GX-02, GX-04, GX-06 및 표준 RS-232C 인터페이스는 동시 사용 불가 *4 공장출고시		MC-10k/30k GX-04K*5 부저/RS-232C/Current loop가 있는 컴퓨터이터 출력 GX-06K*5 아날로그 전압 출력 / Current loop GX-07K 방수 RS-232C 케이블(5m) GXK-012 동물계량 판 GXK-015 이동 케이스 *5 GX-04k, GX-06k 및 표준 RS-232C 인터페이스는 동시 사용 불가 위 옵션 사용시 IP65등급 보장 안됨		

*1 좋은 환경에서 자동-중심판 또는 자동중심 조정계량판 사용 시